


オレンシア®皮下注125mgシリンジ1mL プレフィルドシリンジの取り扱い方法


1. 各部の名称と機能

オレンシア®皮下注125mgシリンジ1mLのプレフィルドシリンジには、ニードルガード(針刺し防止機能)が付いており、注射後は針が内部に格納されます。操作中は、「ニードルガード作動クリップ」に触れないようにしてください。

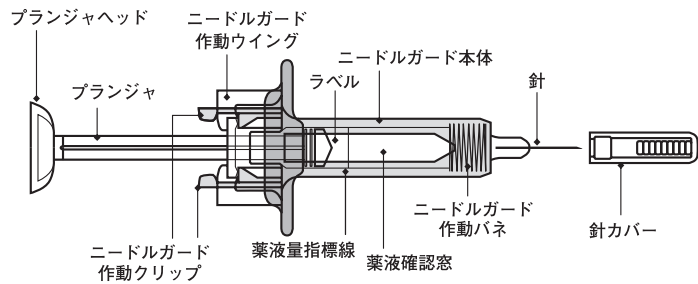

2. 操作方法

①

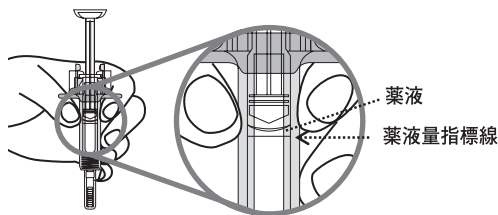


① シリンジ及び薬液を確認します

プレフィルドシリンジのニードルガード本体部分を、針カバーを下にした状態で持ちます。ニードルガード作動クリップには触れないでください。シリンジが壊れていないか、また、期限が過ぎていないかを確認してください。薬液確認窓から、薬液が無色～微黄色の溶液であることを確認してください。

- ・投与前に冷蔵庫から出して室温に戻してください。
- ・薬液の濁り・変色、異物の混入が見られる場合は使用を中止してください。
- ・薬液量指標線まで薬液が入っていることを確認してください。
- ・薬液中に気泡が見られますが、問題はありません。

②

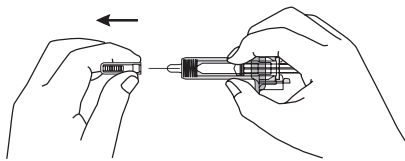


② 針カバーを取り外します

投与直前まで針カバーは取り外さないでください。投与の準備が整ったら、片手で本体を持ち、もう一方の手で針カバーをまっすぐ取り外してください。

- ・針カバーを取り外す際、針やプランジャ、プランジャヘッドには触れないようご注意ください。
- ・針カバーを取り外した後は、速やかに投与してください。
- ・針の先端に薬液の滴が見られることがありますが、問題はありません。


③

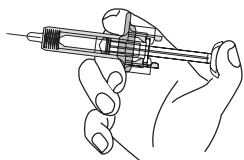

③ シリンジの持ち方

人差し指と中指で本体を挟むようにし、親指をそっとプランジャヘッドに添えてください。なお、プランジャヘッドを押したり、引いたりしないでください。

④

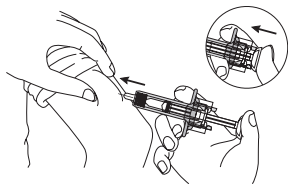


④ 薬液を皮下注射します

シリンジを持っていないほうの手で、あらかじめ消毒した部位を軽くつまみます。針先を皮膚に対して45度程度の角度で素早く刺入してください。次いで、プランジャヘッドをゆっくりと最後まで押し切ってください。

- ・皮下注射は、大腿部、腹部、上腕部のいずれかに行ってください。
- ・ニードルガードを作動させるには、プランジャヘッドを最後まで押し切る必要があります。

⑤

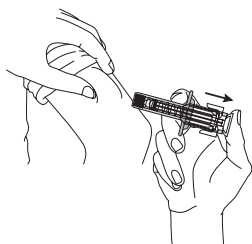

⑤ 針を抜きます

注射針を刺したまま、プランジャヘッドを押している圧力をゆっくりと緩めてください。ニードルガード作動バネが伸びて針が抜け、針全体が格納されます。針全体が格納されたら、皮膚からシリンジ本体を離してください。

使用後のプレフィルドシリンジは分解せずに、医療廃棄物として適切に廃棄してください。